

B & B ALEVO ALU

Der Alltagsheld

Der faltbare Leichtgewichtrollator ALEVO ALU ist der Allrounder für die täglichen Anforderungen. Ob zu Hause, beim Einkauf oder beim Spaziergang sorgt er für Sicherheit und Komfort. Das geringe Gewicht des ALEVO ALU von nur 6,3 kg* | 6,8 kg* garantiert eine sehr gute Alltagstauglichkeit.

Der Premium-Rollator überzeugt durch seine moderne Aluminiumkonstruktion mit dem in Silber abgesetzten ikonischen Triangel-Design an den Flanken. In den Rahmen integrierte Reflektoren und innenliegende Bremszüge sorgen für eine puristische Optik.

Zusätzlich wird das Hängenbleiben mit den Kabelsträngen verhindert. Eine Doppelkreuzstrebe mit zweifacher Verriegelung verleiht dem Leichtgewichtrollator ALEVO ALU ein Höchstmaß an Stabilität. Ergonomisch geformte Griffe liegen sicher in der Hand. Die höhenverstellbaren Schiebegriffe mit Feststellbremse lassen sich individuell an die Körpergröße anpassen.

Die abnehmbare Tasche ist bis zu 5,0 kg belastbar.

Die Bewältigung des Alltags kann für ältere Menschen oftmals anstrengend sein. Mit dem ALEVO ALU haben Sie jederzeit und überall die Möglichkeit, eine Pause einzulegen. Der stabile Sitz mit höhenverstellbarem Rückengurt ist Ihr persönlicher Ruheplatz inmitten der Großstadt. Einfach anhalten, Feststellbremse tätigen und entspannen. Aufgrund seines geringen Gewichts und dem Ein-Hand-Faltmechanismus lässt sich der ALEVO ALU leicht zusammenklappen und transportieren.

Der ALEVO ALU vereint anspruchsvolles Design, hochwertiges Material und eine stabile Bauweise.


ROLLATOREN-MODELL LEICHTGEWICHT



Seine laufruhigen Reifen sorgen für eine optimale Bodenhaftung und geben auch auf glatten Bodenbelägen Halt. Der ALEVO ALU ist serienmäßig mit einer Ankipphilfe ausgestattet.

*Gewicht ohne Tasche und Rückengurt



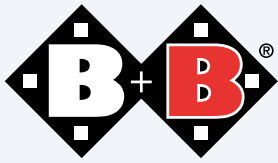

ALEVO ALU

Die aktuellen Preise entnehmen
Sie bitte der separaten Preisliste.




WIR BERATEN SIE GERN!
Tel. 0451 290 715 - 0
info@ostsee-mt.de
www.ostsee-medizintechnik.de

TECHNISCHE DATEN

Sitzfläche	44 x 22 cm
Sitzhöhe	51 58,5 cm
Griffhöhe	81 - 96 cm
Gesamtbreite	62,5 cm
Gesamthöhe	81 - 96 cm
Gesamtbreite gefaltet	26,5 cm
Gesamtlänge	69 cm
Gesamtgewicht*	6,5 7,0 kg
Belastbarkeit	130 kg
Wenderadius	122 cm
Benutzergroße	1,59 - 1,90 m
Material	Aluminium

Erhältlich in den Farben:

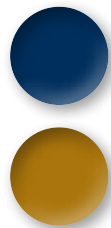

* Gewicht ohne Tasche und Rückengurt

NOTIZEN
